


工具酶

产品名称	规格	货号	特点	推荐应用	目录价 促销价 ^①
pFEN	1600U 3200U	BR1G101-01/02	①pFEN是热稳定Flap核酸内切酶 I，可催化切割分叉双链DNA底物中的5'flap DNA，产生5'磷酸末端。 ②DNA连接酶可以连接FEN1产物来产生双链DNA。 ③在体内实验中，FEN1不仅对冈崎片段成熟通路至关重要，还能参与碱基切除修复。	切割结构特异性DNA。	1000 800 1800 1440
Aci I	100U 200U 1000U	BR1G102-01/02/03	5'...C↓CGC...3' 3'...CGC↑C...5' 限制性内切酶产品，能准确识别C↓CGC位点并切割。	适用于限制性酶切的克隆和鉴定。	519 407 929 735 3849 3079
HinP1 I	1000U 2000U	BR1G103-01/02	5'...G↓CGC...3' 3'...CGC↑G...5' 限制性内切酶产品，能准确识别G↓CGC位点并切割。	适用于限制性酶切的克隆和鉴定。	499 399 899 719
Hha I	1000U 2000U 10000U	BR1G104-01/02/03	5'...GCG↓C...3' 3'...C↑GCG...5' 限制性内切酶产品，能准确识别GCG↓C位点并切割。	适用于限制性酶切的克隆和鉴定。	459 367 819 655 3329 2663
Hpa II	1000U 2000U 10000U	BR1G105-01/02/03	5'...C↓CGG...3' 3'...GGC↑C...5' 限制性内切酶产品，能准确识别C↓CGG位点并切割。	适用于限制性酶切的克隆和鉴定。	459 367 819 655 3329 2663
BspE I	1000U 2000U 5000U	BR1G106-01/02/03	5'...T↓CCGGA...3' 3'...AGGCC↑T...5' 限制性内切酶产品，能准确识别T↓CCGGA位点并切割。	适用于限制性酶切的克隆和鉴定。	929 807 1858 1535 3849 3079
BsrF I	1000U 2000U 5000U	BR1G107-01/02/03	5'...R↓CCGGY...3' 3'...YGGCC↑R...5' 限制性内切酶产品，能准确识别R↓CCGGY位点并切割。	适用于限制性酶切的克隆和鉴定。	929 807 1858 1535 3849 3079
BssH II	250U 500U 2500U	BR1G108-01/02/03	5'...G↓CGCGC...3' 3'...CGCGC↑G...5' 限制性内切酶产品，能准确识别G↓CGCGC位点并切割。	适用于限制性酶切的克隆和鉴定。	499 399 899 719 3699 2999
BspQ I	1000U 2000U 5000U	BR1G109-01/02/03	5'...GCTCTTC(N)↓...3' 3'...CGAGAAG(NNNN)↑...5' IIS型限制性内切酶能识别非回文DNA序列，并在识别序列之外进行切割，限制性内切酶酶切位点：GCTCTTC(1/4)↓。	适用于限制性酶切的克隆和鉴定。	1647 1399
Bsa I	1000U 2000U 5000U	BR1G110-01/02/03	5'...GGTCTC(N)↓...3' 3'...CCAGAG(NNNNN)↑...5' IIS型限制性内切酶能识别非回文DNA序列，并在识别序列之外进行切割，限制性内切酶酶切位点：GGTCTC(1/5)↓。	适用于限制性酶切的克隆和鉴定。	509 433 909 773 3739 3178
EcoR I	5000U 10000U 50000U	BR1G111-01/02/03	5'...G↓AATTC...3' 3'...CTTAA↑G...5' 限制性内切酶产品，能准确识别G↓AATTC位点并切割。	适用于限制性酶切的克隆和鉴定。	419 340 749 630 3050 2463
Nae I	250U 500U	BR1G112-01/02	5'...GCC↓GGC...3' 3'...CGG↑CCG...5' 限制性内切酶产品，能准确识别GCC↓GGC位点并切割。	适用于限制性酶切的克隆和鉴定。	419 340 749 630
Hind III	5000U 10000U 50000U	BR1G113-01/02/03	5'...A↓AGCTT...3' 3'...TTCGA↑A...5' 限制性内切酶产品，能准确识别A↓AGCTT位点并切割。	适用于限制性酶切的克隆和鉴定。	419 340 749 630 3050 2463
Xho I	2500U 5000U 25000U	BR1G116-01/02/03	5'...C↓TCGAG...3' 3'...GAGCT↑G...5' 限制性内切酶产品，能准确识别C↓TCGAG位点并切割。	适用于限制性酶切的克隆和鉴定。	459 367 819 655 3329 2663




产品名称	规格	货号	特点	推荐应用	目录价	促销价 ^①
Msc I	125U 250U 1250U	BR1G117-01/02/03	5'...TGG ↓ CCA...3' 3'...ACC ↑ GGT...5' 限制性内切酶产品,能准确识别TGG ↓ CCA位点并切割。	适用于限制性酶切的克隆和鉴定。	519 929 3849	407 735 3079
Nco I	500U 1000U 5000U	BR1G118-01/02/03	5'...C ↓ CATGG...3' 3'...GGTAC ↑ AC...5' 限制性内切酶产品,能准确识别C ↓ CATGG位点并切割。	适用于限制性酶切的克隆和鉴定。	459 819 3329	367 655 2663
Nde I	2000U 4000U 20000U	BR1G119-01/02/03	5'...CA ↓ TATG...3' 3'...GTAT ↑ AC...5' 限制性内切酶产品,能准确识别CA ↓ TATG位点并切割。	适用于限制性酶切的克隆和鉴定。	459 819 3329	367 655 2663
Mlu I	500U 1000U 5000U	BR1G121-01/02/03	5'...A ↓ CGCGT...3' 3'...TGC GC ↑ A...5' 限制性内切酶产品,能准确识别A ↓ CGCGT位点并切割。	适用于限制性酶切的克隆和鉴定。	509 909 3739	433 773 3178
Dpn I	500U 1000U 5000U	BR1G122-01/02/03	5'...GA ^{m6} ↓ TC...3' 3'...CT ↑ A ^{m6} G...5' 限制性内切酶产品,能准确识别GA ^{m6} ↓ TC位点并切割。	适用于限制性酶切的克隆和鉴定。	509 909 3739	433 773 3178
Xba I	1500U 3000U 15000U	BR1G123-01/02/03	5'...T ↓ CTAGA...3' 3'...AGATC ↑ T...5' 限制性内切酶产品,能准确识别T ↓ CTAGA位点并切割。	适用于限制性酶切的克隆和鉴定。	509 909 3739	433 773 3178
RNase R	1000U 10000U 100000U	BR1G301-01/02/03	是一种来源于大肠杆菌 RNR 超家族且依赖 Mg ²⁺ 的核糖核酸外切酶,从 3'→ 5' 方向将线性 RNA 完全水解成二核苷酸和三核苷酸。对环状 RNA 及双链 RNA 不敏感,可用于特殊结构 RNA 的生产,如环状 RNA (circRNA)、套索结构 RNA (lariat RNA)、3' 突出末端少于 7 个核苷酸的双链 RNA 以及具有复杂结构的 tRNA 等。	circRNA 富集。 RNA 剪接与内含子研究。 RNA 结构与功能研究。	1230 9840 78720	1045 8364 66912
Inorganic Pyrophosphatase	10U 100U 1000U	BR1G401-01/02/03	在体外反转录或扩增过程中,无机焦磷酸酶可水解随着反应生成的无机焦磷酸盐,避免其对反应体系的抑制,使反应平衡向产物生成方向平移。	适用于体外转录。 体外反转录。 PCR 及等温扩增。 DNA 连接反应。 蛋白合成。 酶活检测与生化分析。	899 7198 4495	764 6118 38207

宝锐生物 20U EcoR I 的酶切效率验证

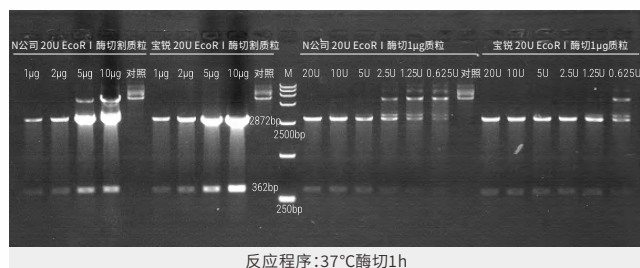

20U的宝锐生物 EcoR I 酶能够完全切割10μg质粒。酶量稀释至1.25U时也能完全酶切1μg质粒,酶切效率优于某国外知名竞品。酶切产物清晰,酶切产物的条带与进口品牌一致,无非特异性切割。

宝锐生物 20U Hind III 的酶切效率验证

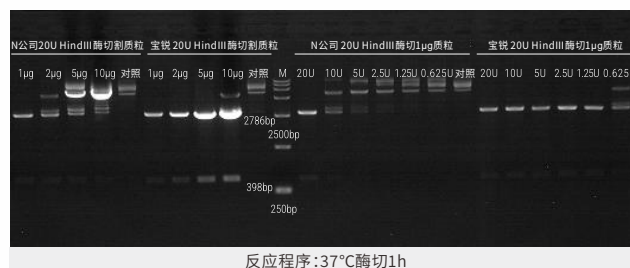

20U的宝锐生物 Hind III 酶能够完全切割10μg质粒。酶量稀释至1.25U时也能完全酶切1μg质粒,酶切效率优于某国外知名竞品。酶切产物清晰,酶切产物的条带与进口品牌一致,无非特异性切割。



公众号



申请试用

网址: www.bioron.com
邮箱: marketing@bioron.com
地址: 珠海市香洲区水岸一路88号

珠海宝锐生物科技有限公司
Zhuhai Bioron Biotechnology Co., Ltd